

TERUMO
Unlocking the Potential of Blood

МИКСЕР ДОНОРСКОЙ КРОВИ T-RAC II

НОВАТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ



ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН И НОВАТОРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

МИКСЕР ДОНОРСКОЙ КРОВИ T-RAC II

Технические особенности

Пульт дистанционного управления прикреплён к многофункциональному штативу (поставляется отдельно), который можно устанавливать в правой или левой части прибора.

Сканер штрих-кодов

Большой цветной сенсорный экран

Разъем USB для передачи данных

Световая антенна-индикатор: информирует о ходе донации и отображает сигналы тревоги

Зажим с фиксирующим механизмом

Большой лоток с держателем фильтров для удобного помешивания; лоток имеет магнитное крепление, что позволяет легко его снимать для очистки.






Основные преимущества

Дизайн прибора T-RAC II позволяет облегчить работу оператора при сборе цельной крови в мобильных и стационарных условиях. Прибор T-RAC II обладает возможностью передачи данных. В комплекте поставляются зарядное устройство, литий-ионная батарея и сканер штрих-кодов. Работу прибора можно оптимизировать применительно к конкретным условиям с помощью системы настроек.

Компактный дизайн для ограниченного рабочего пространства

Новейшие высокотехнологичные материалы и решения позволили снизить габариты прибора, что облегчает его транспортировку и эксплуатацию. Съёмная литий-ионная батарея отличается лёгким весом и обеспечивает высокоэнергетическую ёмкость в течение одной недели после зарядки. Батарею можно заряжать независимо от уровня заряда (отсутствует эффект памяти). Пополнение заряда можно осуществлять когда батарея установлена в прибор.

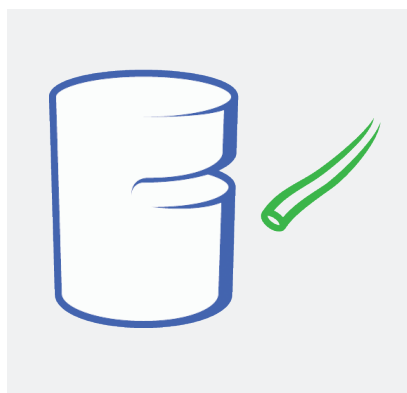


Пульт дистанционного управления (поставляется отдельно)

Пульт дистанционного управления позволяет оператору работать в удобной позе, предотвращая сгибания поясницы и возможные травмы. Световая антенна-индикатор, которая крепится к пульта дистанционного управления, информирует о ходе донации и отображает сигналы. Пульт дистанционного управления поставляется в двух вариантах: как отдельный настольный модуль или как модуль, прикрепляемый к многофункциональному штативу прибора. Это позволяет выбрать вариант пульта, наиболее подходящий к конкретным условиям в пункте донации.

Зажим

В ходе сбора крови зажим фиксирует магистраль в нужном положении. Механизм блокировки срабатывает либо при установке магистрали, путем давления на заднюю стенку зажима, либо при нажатии кнопки на сенсорном экране. В экстренных случаях магистраль может быть разблокирована вручную.

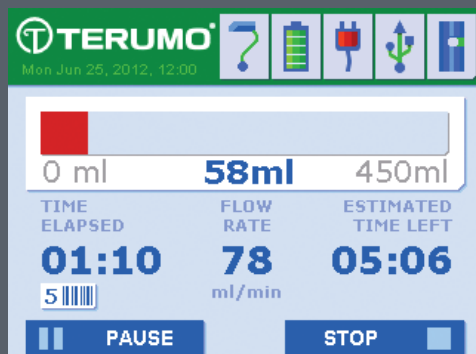

Большой сенсорный экран (14,4 см или 5,67 дюймов)

В ходе проведения процедуры на экране отображаются пиктограммы и указания с поясняющими изображениями. Экран разделен на четко обозначенные области и на каждом этапе сбора крови отображает только необходимую информацию и только необходимые сенсорные кнопки. Для ввода несчитываемых штрих-кодов и иной информации на экране отображается панель ввода данных.

Миксер донорской крови T-RAC II Terumo


Автоматический сбор данных

Настраиваемое программное обеспечение

Настраиваемое программное обеспечение позволяет пользователю задавать и сохранять различные настройки конфигурации и параметров системы. Согласно требованиям надлежащей практики, все основные данные о донации, отсканированные штрих-коды и события записываются и сохраняются во внутренней памяти прибора (до 100 сеансов сбора); при необходимости эти данные можно передать в локальную сеть. В отсутствие сети данные можно загрузить на внешний носитель через разъем USB на передней панели.

Операционное программное обеспечение Terumo для медицинского оборудования (TOMEs)

TOMEs — операционная система управления данными, используемая с некоторыми видами трансфузионного оборудования производства компании Terumo. Двусторонняя передача данных посредством TOMEs позволяет задавать параметры на одной или нескольких системах T-RAC II одновременно. Для каждого сеанса донации можно задать дополнительные условия (например, утверждение донора или конкретную конфигурацию процесса сбора). Программа применяется также для мониторинга работающих устройств и для управления данными о сеансах донации (например, создание записей о разделении компонентов).

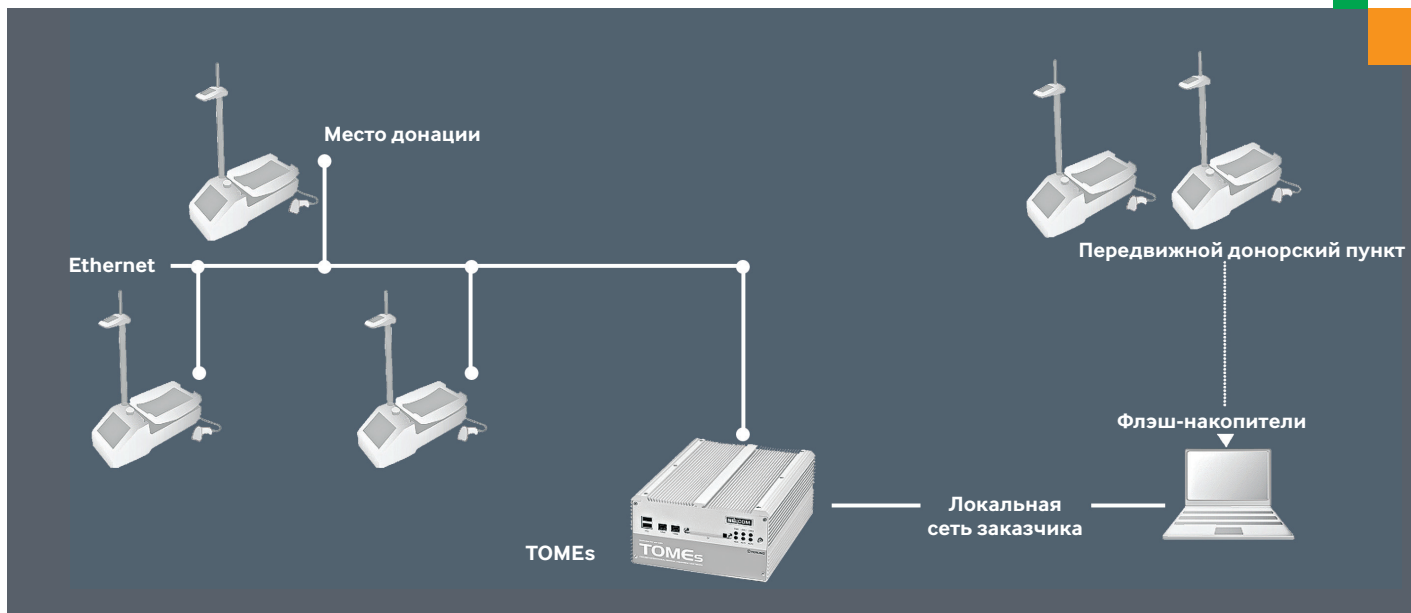

Приспособления и коды продуктов

Наименование продукта	Код	Описание
T-RAC II	ME-TRAC2	Основная модель. В комплекте: Ethernet, разъем USB, литий-ионная батарея, зарядное устройство, сканер штрих-кодов
Многофункциональный штатив	ME-TRAC201	Пульт дистанционного управления со световой антенной-индикатором, штативный вариант
Пульт дистанционного управления	ME-TRAC202	Пульт дистанционного управления со световой антенной-индикатором, настольный
Транспортировочный контейнер	ME-TRAC203	Устойчивый контейнер для транспортировки T-RAC II, включающий все приспособления, кроме TOMEs
Аппаратное обеспечение TOMEs	ME-TOMES	Система управления данными, аппаратное обеспечение
T-RAC II TOMEs	ME-TOMESTR2	Система управления данными, программное обеспечение для T-RAC II

Производитель: Terumo Europe N.V., 3001 Leuven, Belgium

TERUMOBCT

Terumo BCT, Inc.

10811 West Collins Ave.
Lakewood, Colorado 80215-4440
США
Тел. в США: 1.877.339.4228
Тел: +1.303.231.4357
Факс: +1.303.542.5215

Terumo BCT Europe N.V.

Европа, Ближний Восток и Африка
Ikaroslaan 41
1930 Zaventem
Бельгия
Тел: +32.2.715.05.90
Факс: +32.2.721.07.70

Terumo BCT (Asia Pacific) Ltd.

Room 3903-3903A, 39/F
ACE Tower, Windsor House
311 Gloucester Road
Causeway Bay, Гонконг
Тел: +852.2283.0700
Факс: +852.2576.1311

Terumo BCT Latin America S.A.

La Pampa 1517 - 12th Floor
C1428DZE
Buenos Aires
Аргентина
Тел: +54.11.5530.5200
Факс: +54.11.5530.5201

Terumo BCT Japan, Inc.

Ebisu South One Bldg, 9F
1-7-8, Ebisu-minami,
Shibuya-ku, Tokyo 150-0022
Япония
Тел: +81.3.6743.7890
Факс: +81.3.6743.9800